

LE BON CHOIX POUR LES LOTS IMPORTANTS. THE RIGHT CHOICE FOR LARGE QUANTITY APPLICATIONS.



RBP BAUER DEBLISTERING.

D3600

La majorité de nos clients choisissent le modèle D3600 pour augmenter le rendement des lots sur chaque ligne de blisters. Équipé d'un régulateur de vitesse, d'un contrôle de la hauteur de remplissage du magasin, de capteurs de niveau de remplissage, d'un compteur et de jeux de formats spécifiques aux blisters, les médicaments sont vidés des blisters incorrectement remplis - en douceur et conformément aux BPF -et peuvent être immédiatement réintroduits dans le lot en cours.

La D3600 permet toutes les variantes de conditionnement - transversales, longues, diagonales, selon la courbure des plaques blisters ou de la disposition des alvéoles. Différentes séries de produits (blisters en plusieurs étapes) peuvent être collectées séparément. L'utilisation d'un dispositif d'alimentation manuel (par exemple pour les blisters extrêmement bombés) est également possible.


Grâce au cylindre à brosses à rotation inverse, même les petits produits sont vidés en toute sécurité des larges alvéoles en aluminium/aluminium.

En option, la machine peut être raccordée à votre système d'aspiration central.

Most of our customers have a D3600 installed near every blister line to improve their batch yield. Equipped with speed control, magazine level monitoring, level sensors, counter and product-specific tool sets the machine ensures gentle and GMP-compliant recovery of pharmaceuticals which can thus be returned to the current production cycle.

The D3600 can handle push-through blisters lengthwise, crosswise or diagonally, depending on the pocket position and the convexity of the blisters. Different product raws can be recovered separately. It is also possible to use a manual feeder (e. g. for extremely blisters). An optional brush roll working in opposite direction ensures the safe recovery of small products from large Al/Al pockets.

Optionally this machine can be plugged to your central vacuum system.

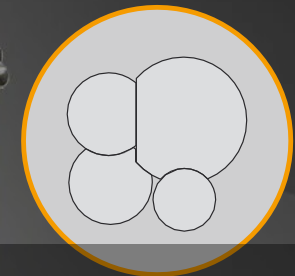

DEBLISTERING MADE EASY!

Deblisterage

Professionel. Efficace.


Le déblisterage efficace a un nom:

Le déblisterage par RBP Bauer

Après avoir fabriqué plus de 4000 jeux de formats, aucune variante de blister ne nous est aujourd'hui étrangère. Cependant, nous relevons chaque nouveau défi avec ambition et plaisir.

N'hésitez pas à nous contacter : nous trouverons une solution à chaque problème de vidage ! Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur les aspects techniques, les performances et les coûts.

Tel: France +33(0)4 50 69 59 91

Modèle automatique	D3600
Utilisable pour	Blisters ouvrables par pression 
Variantes	1.) Sur un poste de travail mobile en acier inoxydable 2.) Sur un support ouvert en acier inoxydable et une armoire de commande montée sur le côté
Maße (L x l x H)	1.) 950 mm x 500 mm x 1100 mm 2.) 550 mm x 480 mm x 1150 mm
Poids env..	1.) 110 kg 2.) 70 kg
Performance	Réglage en continu 60 Blister/Min
Plage de formats (l x L)	150 mm x 120 mm
Jeu de format	3 kg
Alimentation	110/230 V AC / 50-60 Hz
Tension de commande	24 V DC
Temps de chgt de format	env. 3 min
Observation	Modèle Déposé Nr. 04119

Toutes les machines RBP et les outils de déconditionnement spécifiques aux blisters sont le fruit de notre savoir-faire. Lors de la fabrication, nous utilisons exclusivement des composants et des matériaux que nous avons soigneusement sélectionnés et testés et dont la qualité répond aux exigences strictes de l'industrie pharmaceutique. Toutes les machines RBP sont préréglées à la livraison et peuvent être mises en service immédiatement en quelques manipulations. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer la mise en service, l'initiation et la formation de votre personnel sur place ainsi qu'une assistance à la validation conformément à vos spécifications. Pour chaque machine RBP, vous recevez une documentation complète composée d'un manuel d'utilisation facile à comprendre et richement illustré, d'un schéma électrique avec nomenclature, du plan de la machine, du certificat de contrôle GS et d'une déclaration de conformité UE comprenant une liste des matériaux utilisés. Et bien entendu, nous accordons une garantie de deux ans sur toutes les machines RBP ainsi que sur nos jeux de formats.

Deblistering

Professional. Efficient.

Efficient deblistering has a name:


RBP Bauer Deblistering.

With more than 4000 different sets of tooling sold to date, we have handled any conceivable type of blister. But even with this record, we are still looking forward to new challenges.

RBP Bauer has the right answer to all of your deblistering needs!

We will be pleased to talk to you about technical aspects, specifications and costs.

Tel: +49-2251-77478-0

Model	D3600
In use for	Push through packs 
Versions	1.) Mounted on mobile stainless steel workstation 2.) Open stainless steel workstation and attached switchgear cabinet
Size (L x W x H)	1.) 950 mm x 500 mm x 1100 mm 2.) 550 mm x 480 mm x 1150 mm
Weight approx.	1.) 110 kg 2.) 70 kg
Output	infinitely variable, up to 60 blisters/min
Format range (W x L)	150 mm x 120 mm
Tool sets	3 kg
Supply voltage	110/230 V AC / 50-60 Hz
Control voltage	24 V DC
Tooling changeover approx.	3 min
Comments	GS-Nr: 04119

All RBP-machines and deblistering tools are a testimony to our comprehensive know-how. We only use carefully selected and thoroughly tested quality parts and materials in accordance with the pharmaceutical industry's demanding standards. All RBP-machines are factory-set on delivery and can be commissioned immediately with minimum start-up effort. On request, we can offer you setup and on-site training services as well as validation support according to your specification. All RBP-machines come with a comprehensive set of documentation comprising easily understandable and richly illustrated operating instructions, a circuit diagram with part lists, the machine layout, the GS test certificate and an EU Declaration of Conformity including a list of the used materials. All RBP-machines and change parts are covered by a product warranty of two years. Of course, you can rely on our continued customer support after this period, should any problems occur.

